



白十字

一般医療機器

滅菌済

# ラパクリアシート

腹腔鏡手術向け造影材入ガーゼ

3cm×15cm  
4枚合わせ

15cm

3cm

日本製

腹腔鏡下手術の際に  
適度な大きさの  
X線造影材入不織布ガーゼです!

X線が抜けにくい  
縫製加工済


ラパクリアシート  
3cm×15cm  
5枚 滅菌済  
使用期限  
2023.7

ラパクリアシート  
3cm×15cm  
5枚×15袋入  
MADE IN JAPAN  
腹腔鏡手術向け造影材入ガーゼ

## 特長①


造影効果の高いモノフィラメント造影材を採用。  
レントゲン撮影を行うことで、位置の特定ができます。

このX線写真は、ラパクリアシートと同じX線造影材を使った手術用ガーゼでの画像です。

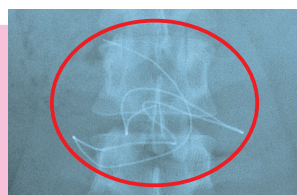

## 特長②


ラパクリアシートはコットン生まれのキュプラ不織布、  
旭化成のベンリーゼ®を使用しています。  
この素材はリントが少なくソフトなので、  
臓器の愛護的な圧排や保護に適しております。

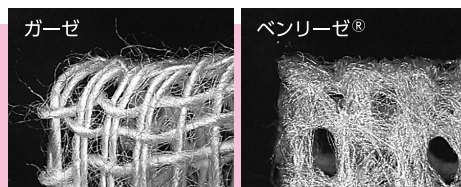

## 特長③

吸収力は通常のガーゼと比べ優れております。

ガーゼは自重の約7倍の吸水量に対して  
ラパクリアシートは自重の約8倍の吸水量

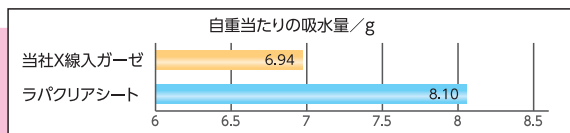

商品名・規格	寸法 高さ×幅×奥行(mm)	重量	希望小売 価格	梱 入数	品番	JANコード	ITFコード
ラパクリアシート 3×15 5枚15袋入 滅菌済	単品 135×255×105	215g	オープン 価格	6	10677	4 987603 106772	梱 14987603106779
	梱 295×330×270	1.6kg					

一般的名称：X線造影材入リスボンジ 販売名：ハクジュウジNWオペーゼX滅菌済 届出番号：13B2X00023000162

ベンリーゼ®は旭化成の登録商標です F50Y239

●お問い合わせは

白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田3-23-12

商品情報はこちら

2020.11

